




BOY® N

Kompressor

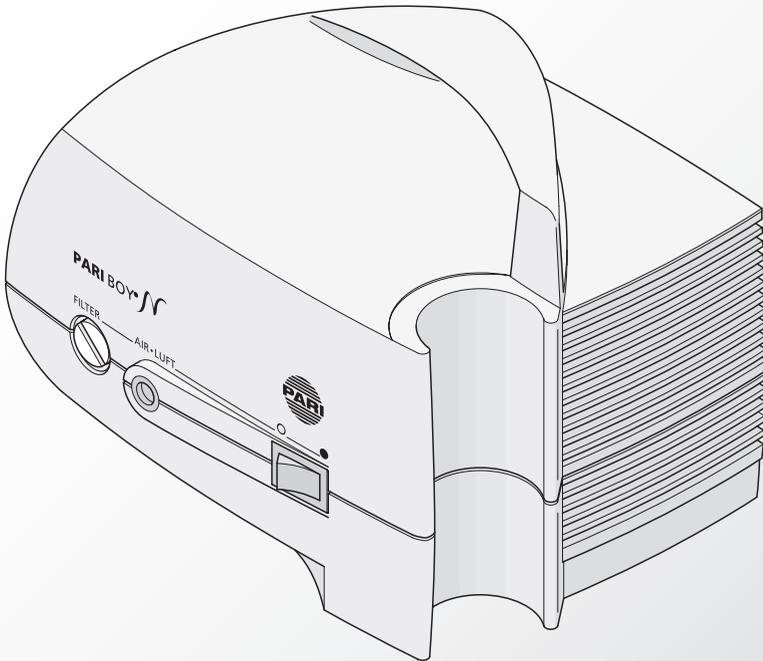

CE 0123



(FR) MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service.
Conservez soigneusement le mode d'emploi.

Information


Combiné avec un nébuliseur PARI, le compresseur PARI BOY N est un appareil d'inhalation hautement efficace pour le traitement par inhalation des voies respiratoires inférieures avec des agents médicamenteux en aérosol et les anesthésies topiques par inhalation. Le compresseur PARI BOY N fonctionne avec tous les modèles de nébuliseur PARI (à l'exception de PARI LC PLUS UNIVERSAL).





Avant tout traitement, il est impératif de procéder à un examen médical. N'utilisez que des médicaments prescrits ou recommandés par votre médecin.

Vérifiez que les éléments de votre compresseur PARI BOY N sont au complet:

- compresseur PARI BOY N (1)
- nébuliseur PARI (2) y compris embout buccal et masque
- Bague d'extension LC (3)
- tuyau de raccordement (4)
- cordon d'alimentation (5)

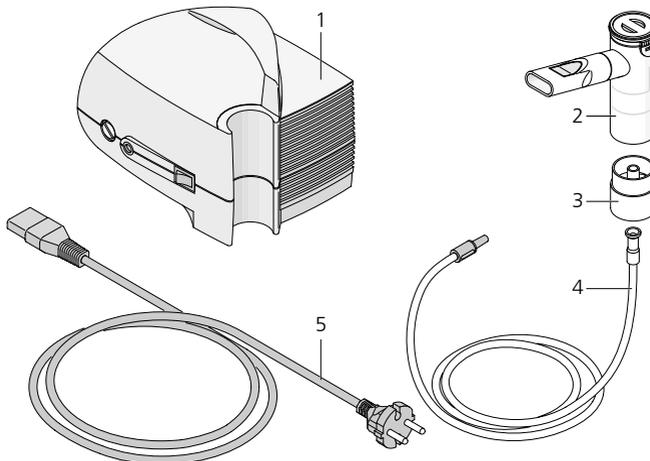

Information

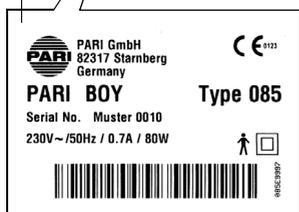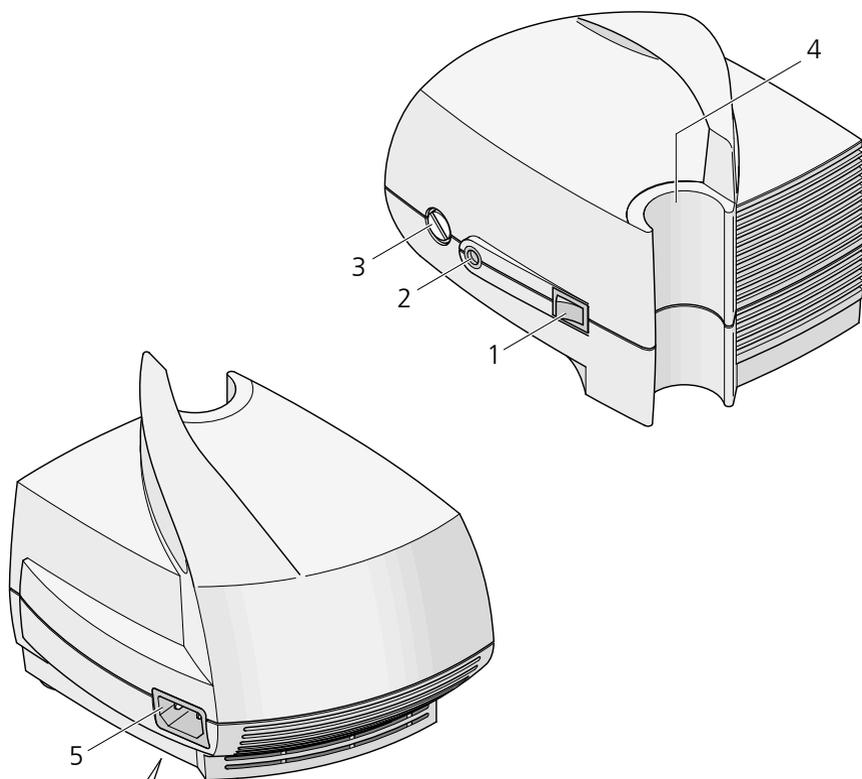

- 1 Bouton Marche/Arrêt
- 2 Raccordement tuyau
- 3 Filtre
- 4 Support nébuliseur
- 5 Prise secteur
- 6 Plaque signalétique (sur le dessous de l'appareil)

Mise en service



- Placer le compresseur PARI BOY N sur une surface plane stable.



Veillez à ce que les fentes d'aération sur les côtés de l'appareil soient dégagées.

Ne recouvrez en aucun cas l'appareil lorsqu'il est en service.

Assurez-vous que la tension du secteur est conforme aux indications figurant sur l'appareil.

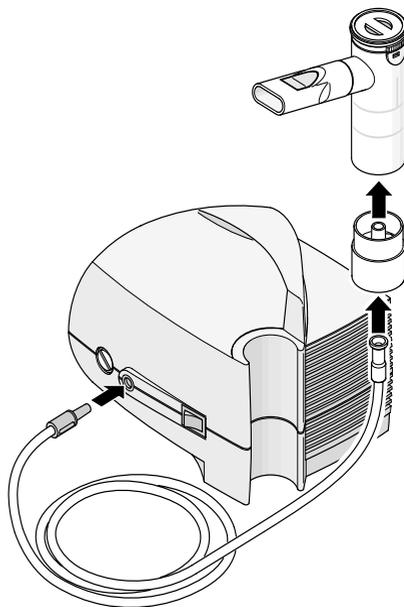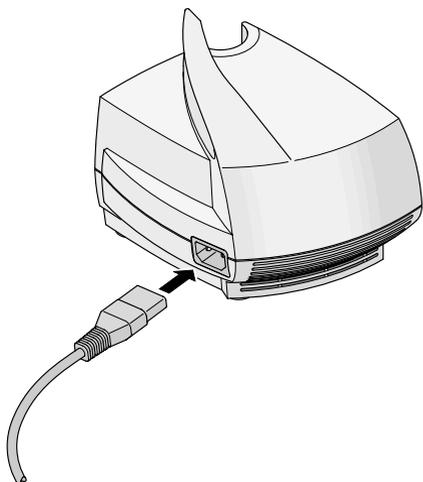


- Raccorder le cordon d'alimentation à la prise située à l'arrière de l'appareil, puis à une prise de courant appropriée.
- Insérez l'adaptateur du tuyau de raccordement dans la prise d'air du compresseur en le tournant légèrement. Fixer l'autre extrémité à la bague d'extension PARI LC. Le nébulisateur peut alors être facilement placé dans la bague d'extension. Le tube connecté peut rester connecté à la bague d'extension pour une utilisation plus aisée.



Assurez-vous que le tuyau est fermement raccordé au compresseur et au nébulisateur

Mise en service

Lisez intégralement le mode d'emploi du nébuliseur et utilisez le nébuliseur conformément à la description.

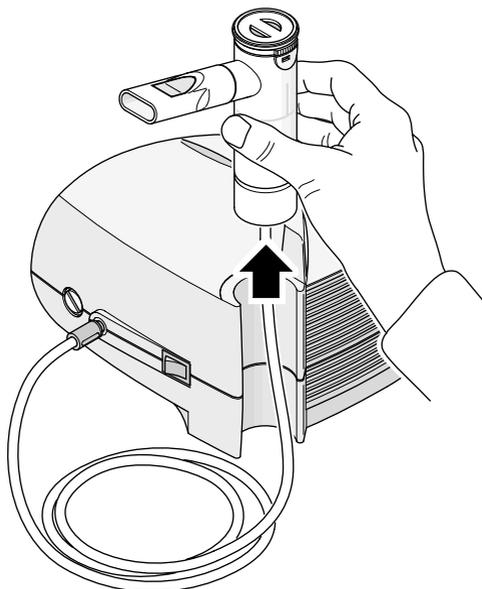

- Retirez le nébuliseur de son support avant le traitement.
- Mettez le compresseur en marche avec l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Remettez le nébuliseur dans son support après le traitement.



Attention:

Pour éviter tout problème de santé (une infection, par ex.), lisez attentivement le chapitre „Hygiène“ dans le mode d'emploi de chaque nébuliseur PARI respectivement utilisé.


Il vous faut par ailleurs observer les consignes du présent mode d'emploi en matière de „Nettoyage“ et de „Remplacement du filtre“.

Nettoyage



Eteignez le compresseur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

- Essuyez la surface extérieure du boîtier de votre compresseur PARI BOY N avec un chiffon humide.

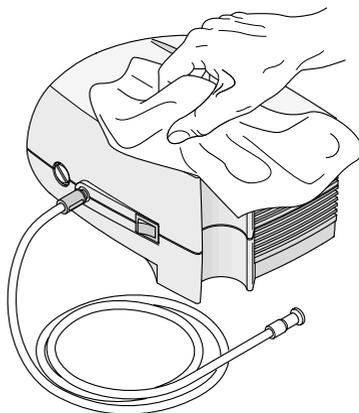

Ne vaporisez pas de liquide sur les fentes d'aération! Une infiltration de liquide dans les fentes d'aération risquerait d'endommager le système électrique et d'autres éléments du compresseur et de causer une panne.

Si de l'eau a pénétré dans le compresseur, contactez un détaillant agréé ou le service après-vente de PARI (tél.+49-8151-279279 ou info@pari.de). Ne réutilisez votre compresseur PARI BOY N qu'en fonction de ses instructions et/ou après un contrôle et les réparations éventuellement nécessaires effectués par votre détaillant agréé ou le service après-vente de PARI.

Selon les conditions ambiantes, de la condensation peut se déposer dans le tuyau de raccordement du nébuliseur pendant les inhalations. Pour garantir un traitement infaillible, il faut éliminer toute trace d'humidité. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- Retirez le tuyau du nébuliseur.
- Nettoyez le nébuliseur conformément au mode d'emploi.
- Laissez l'autre extrémité du tuyau dans le compresseur.
- Faites marcher le compresseur jusqu'à ce que la buée éventuelle se soit évaporée.

Remplacement du filtre

Le filtre qui se trouve dans la plaque avant de votre compresseur PARI BOY N doit, dans des conditions d'utilisation normales, être remplacé toutes les 500 heures de fonctionnement, ou au moins une fois par an.


Vérifiez le filtre régulièrement (après 10 ou 12 séances d'inhalation). S'il est encrassé (grisâtre ou brunâtre) ou bouché, remplacez-le. Si le filtre est humide, il doit aussi être remplacé.

Ne tentez pas de nettoyer le filtre et de le réutiliser!

Utilisez uniquement le filtre original PARI pour ne pas risquer d'endommager votre compresseur PARI et ainsi compromettre l'efficacité du traitement.

Pour remplacer le filtre:

- Dévissez le support du filtre de votre PARI BOY N en utilisant une pièce de monnaie dans le sens inverse aux aiguilles de la montre.

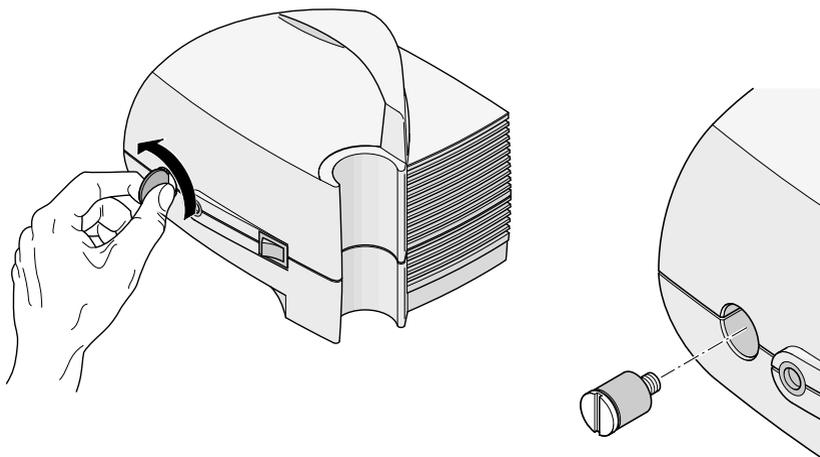

- Introduisez le support du filtre avec le nouveau filtre dans votre PARI BOY N et revissez-le avec une pièce de monnaie dans le sens des aiguilles de la montre.

Spécifications techniques

Raccordement électrique: 230V~ / 50Hz

Dimensions du boîtier (l x h x p): 19.2cm x 14.5cm x 15cm

Poids: 1.7 kg

Explications des symboles:



Marche/Arrêt



Courant alternatif



Type B



Appareil de la catégorie de protection II



- Attention! Consulter le mode d'emploi
- Attention!



Pour la protection de l'environnement et dans l'intérêt de la récupération des matières premières, ne pas éliminer l'appareil en fin d'utilisation avec les déchets ménagers, mais l'apporter dans un centre de ramassage pour appareils électriques.

Remarques importantes

Le compresseur PARI BOY N est un appareil électrique. Il ne doit être utilisé ni sans surveillance ni dans un endroit à danger d'explosion ou dans une pièce humide. La manipulation de l'appareil exige une parfaite connaissance et l'observation du présent mode d'emploi. L'utilisateur assume à lui seul la responsabilité pour le fonctionnement sûr de l'appareil en cas de manipulation non conforme à l'utilisation à laquelle il est destiné. Les réparations de l'appareil ne seront effectuées que par nous-mêmes ou par un centre de services agréé par PARI. En cas de réparation dans un de ces centres, il faudra exiger la délivrance d'une attestation précisant la date, la nature et l'ampleur de la réparation, ainsi que le nom et la signature de l'entreprise en question. N'utiliser l'appareil qu'avec des accessoires PARI originaux.


Remarques importantes

La maison PARI GmbH décline toute responsabilité pour des dommages ou pannes causés par l'utilisateur suite à une mauvaise utilisation ou à une manipulation non conforme aux fins d'utilisation de l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil du réseau, retirer la fiche de secteur de la prise de courant.

Sous réserve de toutes modifications techniques.

Conditions de transport et d'entreposage:

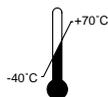

Température ambiante entre -40°C et $+70^{\circ}\text{C}$

RH
10% - 100%

Humidité atmosphérique relative de 10 % à 100 %

P
500hPa-1060hPa

Pression atmosphérique entre 500hPa et 1060hPa

Conditions de garantie

Pendant la période de garantie, les défauts de fabrication et vices de matériaux seront éliminés à titre gracieux par PARI ou par l'un de nos services après-vente agréés. L'acheteur n'a droit ni à réhabilitation, ni à une réduction du prix, ni au refus de l'achat. La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés suite à une mauvaise utilisation de l'appareil. Elle deviendra nulle suite à des manipulations de l'appareil par des personnes non autorisées. Nous n'indemniserons aucun dommage direct ni indirect.

En cas de réclamation, retournez l'appareil avec toutes ses pièces à votre magasin spécialisé ou renvoyez-le à PARI dans un emballage approprié, dûment affranchi, en y joignant la carte de garantie munie du cachet de votre magasin spécialisé.

Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

Le délai de garantie court à partir de la date d'achat.

Garantieschein für PARI BOY N ***Certificate of Guarantee for PARI BOY N***

Bar code label

Geräte Nr.
Appliance No.

Für dieses Gerät gewähren wir 3 Jahre Garantie. Die Garantiefrist läuft ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit beseitigen wir oder ein von uns autorisierter Kundendienst Fabrikations- und Materialfehler unentgeltlich. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Die Garantie erlischt bei Eingriffen am Gerät durch hierzu nicht befugte Stellen. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder Rücktritt besteht nicht. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt. Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sollten Sie eine Reklamation haben, bringen Sie bitte das vollständige Gerät zu Ihrem Fachhändler oder schicken Sie es uns gut verpackt und frankiert mit diesem Garantieschein ein.

We grant a 3 year guarantee on this appliance, commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we or an authorised customer service point will repair, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in material or workmanship. Damage arising from improper use of the appliance is not covered by this guarantee. The guarantee shall become void if repairs are undertaken on the appliance by unauthorised persons. The owner shall not be entitled to cancel the sale or demand a partial or full refund of the purchase price. No compensation will be paid for consequential or direct damage. Wearing parts are excluded from the guarantee.

In the event of a claim under this guarantee, please bring the complete appliance to your dealer or send it to us, well packed and postage paid, together with this certificate of guarantee.

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

D-82317 Starnberg

Kaufbestätigung: Das Gerät mit der obigen Gerätenummer wurde von uns original verpackt verkauft.

Confirmation of purchase: The appliance with the above appliance number was sold in its original packaging.

Kaufdatum/Purchase date

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers/stamp and signature of the dealer

Spezialisten für effektive Inhalation



Moosstrasse 3 • D-82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (81 51) 279-279 • Fax: +49 (81 51) 279-101
e-mail: info@pari.de • www.pari.de