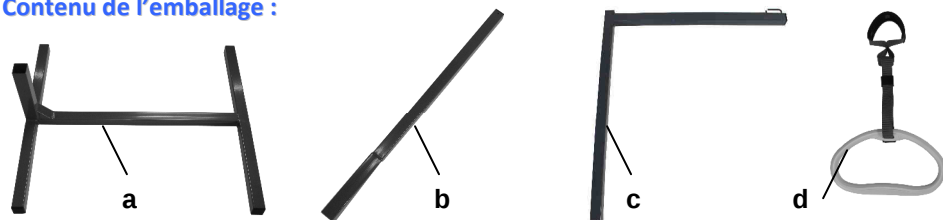
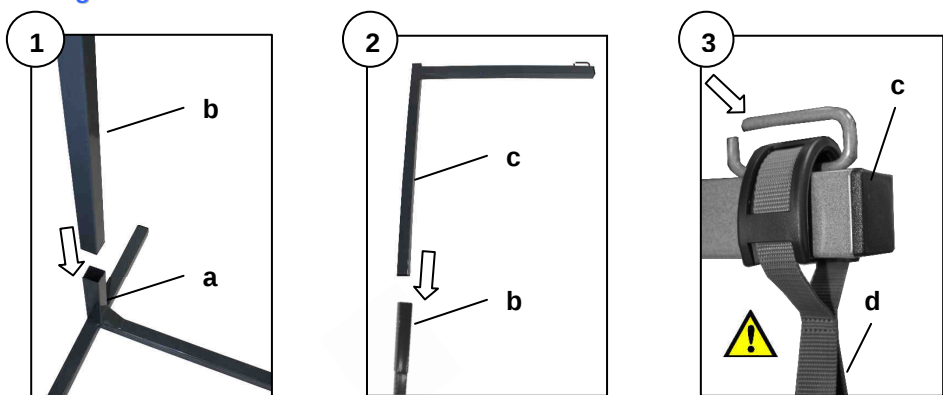



Contenu de l'emballage :**Montage :****Recommandations :****Avertissements :**

- Ce dispositif est destiné à être utilisé en complément d'un lit standard ou médicalisé pour faciliter l'aide au lever.
- Installer la potence derrière ou sur le côté du lit en veillant à ce que la surface d'appui au sol soit bien plane.
- Ajuster la poignée à la hauteur souhaitée en réglant la sangle.
- Contrôler que la sangle soit toujours positionnée à l'intérieur du crochet de sécurité.
- Ne pas dépasser le poids maxi utilisateur de 90kg.



Nettoyage : Essuyer toutes les surfaces du fauteuil avec un non-tissé imprégné d'une solution de nettoyage adaptée (Anios détergent désinfectant surfaces hautes ou autre produit équivalent).
 Proscrire impérativement : alcool pur, Acétone, Perchloréthylène et trichloréthylène, solvants, détergents, produits d'entretien abrasifs et cires.

Entretien préventif / contrôle :

- . Propreté, état général du revêtement époxy.
- . Usure de la sangle.

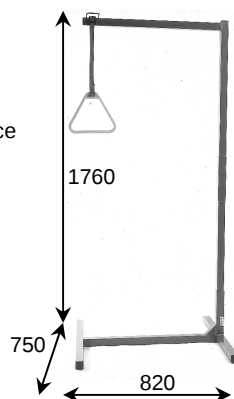

90 Kg

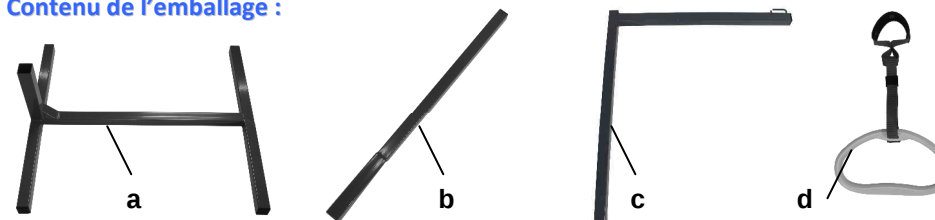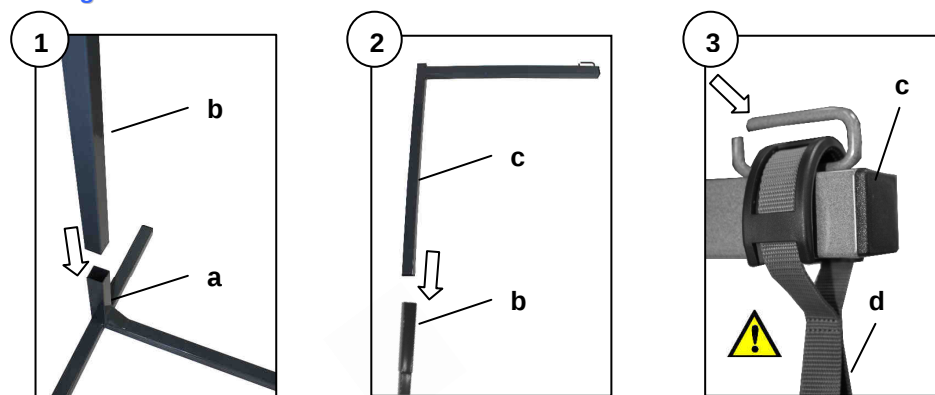
**Contenu de l'emballage :****Montage :****Recommandations :****Avertissements :**

- Ce dispositif est destiné à être utilisé en complément d'un lit standard ou médicalisé pour faciliter l'aide au lever.
- Installer la potence derrière ou sur le côté du lit en veillant à ce que la surface d'appui au sol soit bien plane.
- Ajuster la poignée à la hauteur souhaitée en réglant la sangle.
- Contrôler que la sangle soit toujours positionnée à l'intérieur du crochet de sécurité.
- Ne pas dépasser le poids maxi utilisateur de 90kg.

Nettoyage : Essuyer toutes les surfaces du fauteuil avec un non-tissé imprégné d'une solution de nettoyage adaptée (Anios détergent désinfectant surfaces hautes ou autre produit équivalent).
 Proscrire impérativement : alcool pur, Acétone, Perchloréthylène et trichloréthylène, solvants, détergents, produits d'entretien abrasifs et cires.

Entretien préventif / contrôle :

- . Propreté, état général du revêtement époxy.
- . Usure de la sangle.

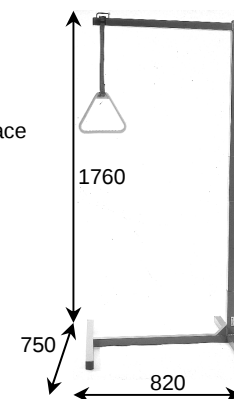

90 Kg

